

NMT

NEUROMUSKULÁRNÍ TRANSFER

Modul NMT vytváří hodnoty potřebné pro lékaře za účelem udržení dostatečné relaxace v průběhu operace, umožňuje bezpečnou extubaci pacientů a minimalizuje zbytkovou paralýzu pacienta.

- Modul NMT je objektivní monitorovací parametr pro neuromuskulární blokádu.
- Dodává elektrické impulzy nízké úrovně do periferního motorického nervu
- měří odpovídající svalovou odezvu a kvantifikuje reakce jako procento a počet



Mechanosensor

- používá Kinemyografii (KMG) pro měření pohybu palce v reakci na stimulaci nervů
- Pediatrický nebo dospělý



Elektrosensor

- používá Elektromyografii (EMG) pro zaznamenávání svalové elektrické aktivity v reakci na stimulaci nervů
- umožňuje měření i při zhoršeném pohybu ruky
- lze použít i na nohu




POZNÁMKA: Pro dosažení optimálních výsledků použijte GE elektrody NMT, které jsou validované a navrženy pro monitorování NMT. Celý povrch elektrod je vodivý a poskytuje lepší podmínky měření a toleranci pro pohyb ruky (elektrody57268-HEL),

NMT

NEUROMUSKULÁRNÍ TRANSFER

objednáací číslo	popis produktu	množství
888418	Sensor NMT MechanoSensor, dospělý	1 ks/bal
897439	Sensor NMT MechanoSensor, dětský	1 ks/bal
888416	Sensor NMT ElektroSensor (dospělý i dětský)	1 ks/bal
888414	Propojovací kabel k sensoru pro modul NMT, délka 3 m	1 ks/bal
57268-HEL	Elektrody NMT Ag/AgCl	30 ks/bal

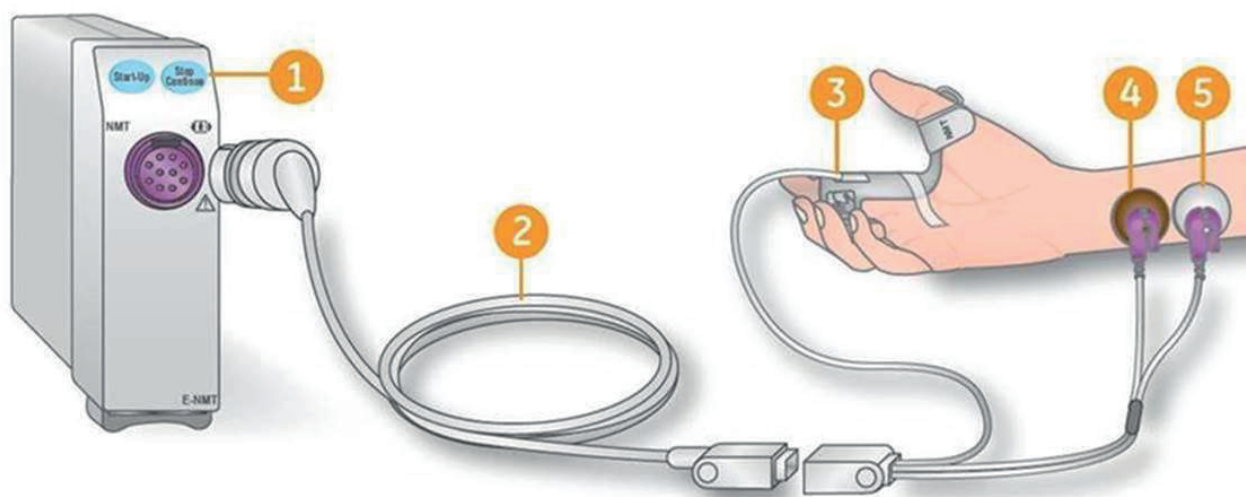

- 1 modul NMT
- 2 propojovací kabel
- 3 mechanosenzor
- 4 svod se zakončením grabber
- 5 elektroda